

# Fauteuil Voyager III

Fabriqué à la main avec le savoir-faire japonais

---

 **Belmont**

The background of the entire page is a vibrant blue sky filled with various white, fluffy clouds. The clouds are scattered across the frame, with a large, prominent one in the upper left and another large one in the lower center. The sky is a deep, clear blue.

 **Belmont**

# Voyager III

---

Principales caractéristiques de la gamme:

**Tablette praticien sur bras rotatif ambidextre**

**Choix de sellerie multiples**

Sellerie finition standard (sans coutures).

Sellerie finition Confort (surpiques doubles).

**Tablette praticien configurable selon vos souhaits.**

**Utilisation simple et intuitive.**

---



# Le Voyager III

Ambidextre, soucieux de l'hygiène et simple à utiliser

Exemple de sellerie standard en *Sonora* (Tissu Ultraleather)



La conception du pivot central permet une procédure de changement de position très facile et pour 100% des opérateurs gauchers et droitiers. La simplicité de cette solution élégante permet également de positionner la tablette praticien derrière le patient pour plus de discrétion lors du nettoyage et de la préparation des instruments.

Voyager III



Le bras de la tablette praticien, monté sur la base du fauteuil permet un accès complet de l'opérateur de 9 heures à 15 heures

## Unit et fauteuil dentaire ambidextre

### Principales caractéristiques de la tablette praticien :

Moteurs électriques intégrables: Mcx ou MX2 Bien Air, ou NLX Nano NSK

Détartreurs intégrables: Satelec SP Newtron et Newtron Led, Varios 170 NSK

Lampe à polymériser intégrable: Satelec Miniled

Panneau de commande pour les mouvements du fauteuil

Plateau en acier amovible et tapis en caoutchouc (en Option)

Surfaces faciles à nettoyer réglable en hauteur

Les mouvements du fauteuil et le contrôle des instruments se font au pied. Le Voyager III est un partenaire de travail épuré, simple et fiable qui permet le contrôle complet par l'opérateur avec la possibilité de monter un panneau de commande sur la tablette praticien



Scyalitique  
Series 300 LED

# Les avantages du Voyager III

Flux de travail ambidextre d'une grande efficacité pour les praticiens

Droitier



Gaucher

Pour commencer, faire monter l'assise et redresser le dossier du fauteuil, puis libérer crachoir en soulevant la goupille de verrouillage.

Pour finir, la positionner le crachoir, puis verrouiller la goupille de sécurité.

La tablette pivote d'un côté ou de l'autre selon la position souhaitée (droitier ou gaucher)

Le crachoir passe à l'intérieur de la console

La tablette praticien et le crachoir tournent aisément autour du fauteuil, sur des pivots centraux situés au-dessous du dossier

## Changement de position en 60 secondes.

Ne nécessite aucun outil, aucune force ou technique particulière, et il permet d'obtenir des conditions de travail identiques pour les opérateurs gauchers comme droitiers.

Voyager III


Unit et fauteuil Voyager III Configuration Droitier

Unit dentaire ambidextre

### Espace de travail libre

#### Le Voyager III est épuré

un partenaire de travail simple et fiable qui permet le contrôle complet par l'opérateur avec un panneau de commande intégré sur la tablette praticien

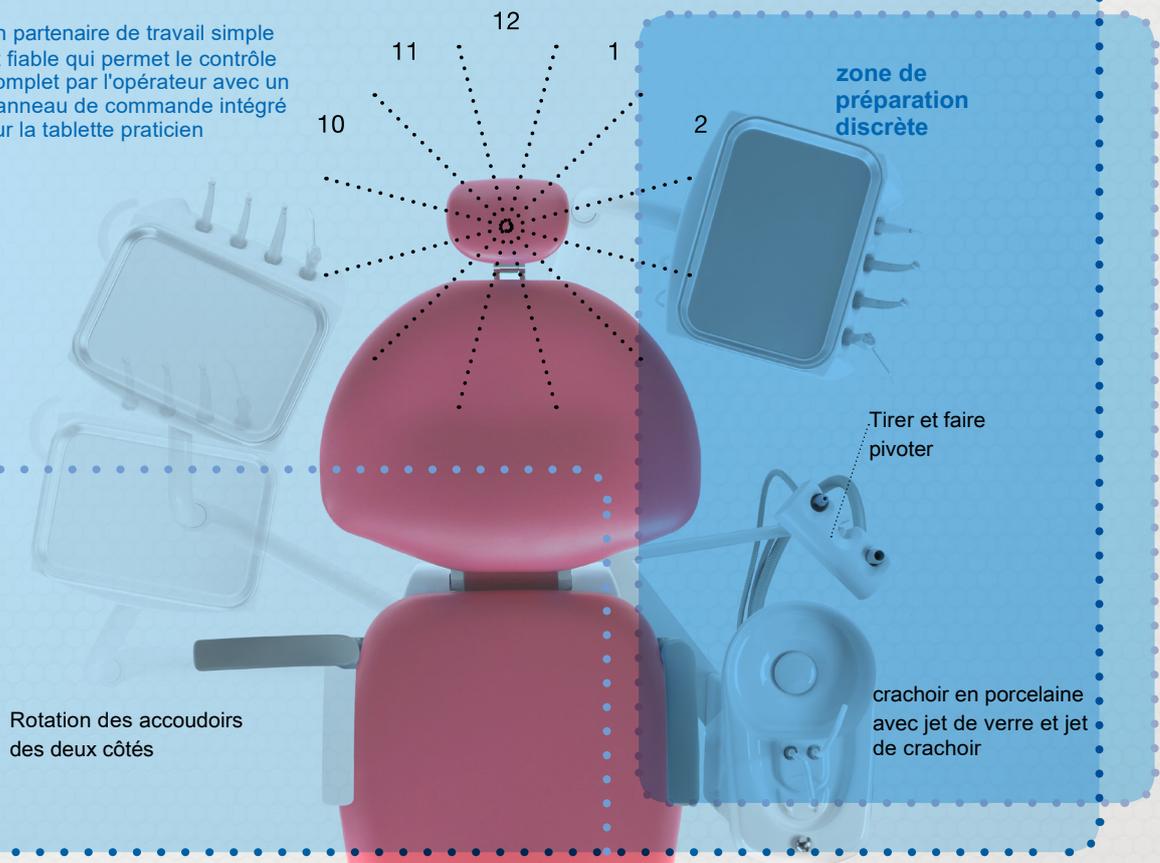

Rotation des accoudoirs des deux côtés

Tirer et faire pivoter

crachoir en porcelaine avec jet de verre et jet de crachoir

La tablette praticien ne gêne pas l'accès des patients; elle offre un accès particulièrement accueillant au fauteuil

Les mouvements du fauteuil et des instruments rotatifs se commandent au pied

**l'accès des patients à la zone de consultation est naturel**

# Voyager III (version crachoir)

Configuration complète, facile à entretenir pour les cabinets omnipratiques

## Unit et fauteuil dentaire ambidextre

Le fauteuil en position basse et les accoudoirs ouverts offrent un accès facilité pour les patients

### Caractéristiques clés du VOYAGER III (version crachoir)

#### Fauteuil:

Repose nuque double articulation  
Positions du fauteuil préprogrammées  
Pédale de commande 8 fonctions  
Accoudoirs pivotants (des deux côtés)

#### Crachoir:

Ambidextre, rotatif à 90°  
Jet de verre et de crachoir démontable pour désinfection  
Support assistante orientable  
Pièces à main d'aspiration pour pompe à salive et aspiration chirurgicale  
Cuvette de crachoir en porcelaine



Scyalitique  
Series 300 LED

*Zone sans obstructions pour faciliter l'entrée et la sortie des patients*



**La quintessence de la convivialité pour l'opérateur**, avec utilisation équivalente à gauche et à droite. Le cart Voyager III seul avec sa boîte au sol autonome est une configuration très peu encombrante et s'associe parfaitement avec un fauteuil sans unit de la gamme Belmont

**Cart seul  
Voyager III**



**Voyager III Module (Cart Seul) principales caractéristiques:**

- Réglable en hauteur (uniquement pour la version sur piètement à roulette)
- Pédale de commande pour les instruments
- Montage sur piètement à roulette ou sur bras articulé (fixation murale)
- plateau en acier inoxydable (en option)

**Cart seul  
VOYAGER**

**Scyalitique  
Series 300 LED**



# Voyager III

Configurations, systèmes « flexibles »  
et équipements compatibles

## Configurations unit + fauteuil Voyager III

**VOYAGER III WOC (Version sans Crachoir)**



Fauteuil, tablette praticien avec crachoir  
et support assistante

**(VOYAGER III WOC Version avec crachoir)**



Fauteuil avec crachoir et support assistante

## Voyager III Cart seul

### Voyager III Cart seul

Version sur piétement à  
roulettes



### Voyager III Cart seul

Version murale



## Scyalitique à LEDs (Option)

**Series 900  
à LEDs**



Version 10 LEDs

**Series 300  
à LEDs**



Version 5 LEDs

# Voyager III

## Caractéristiques et options

Voyager III

### Système de support instruments à carquois

Bras de la tablette praticien monté sous le fauteuil



Le pivot central permet une utilisation ambidextre

Type de support



Configuration jusqu'à quatre instruments

Configuration 'flexibles' et sur mesure



Voyager III Module (Cart seul)



Voyager III Module (version murale)

### Tablette praticien et ses options



conception soignée de l'hygiène et surfaces faciles à nettoyer

Panneau de commande de l'opérateur



Pour les mouvements du fauteuil



Plateau amovible en acier inoxydable (option)

### Caractéristiques du fauteuil

Repose-nuque double articulation réversible



Mouvements ultra-polyvalents actionnés d'une main, ajustement à différentes tailles de patients, y compris pour les petits enfants


Dossier extra plat



### Caractéristiques du crachoir

Crachoir en porcelaine

Support assistante

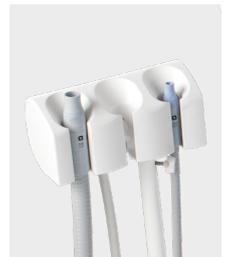

Crachoir et support assistante faciles à nettoyer

### Options de sellerie

Sellerie sans coutures (en standard)



Disponible en cuir synthétique Ultrasoft ou Stamskin

En option: **Sellerie Confort** (Double surpiqure)  
**Sellerie Premium** (Surpiqure multiples)

### Types de montage du scyalitique

Scyalitique Serie 300 à LED



Scyalitique monté sur unit crachoir Voyager III



Scyalitique monté au plafond

Note: sur Voyager III WOC uniquement, le support assistant est un support Comfort Dürr Dental avec préfiltre intégré.

**Takara Compagnie Paris Sarl**

**Siège social et salle d'exposition**

56, Rue des Hautes pâtures, 92000 Nanterre

T. 020 7515 0333

F. 020 7537 6102

E. [info@belmont.fr](mailto:info@belmont.fr)

W. [www.belmont.fr](http://www.belmont.fr)

---

 **Belmont**