


PRESENTATION EURUS S6/S8

HISTOIRE

Belmont a fêté ses 100ans le 5 Octobre 2021

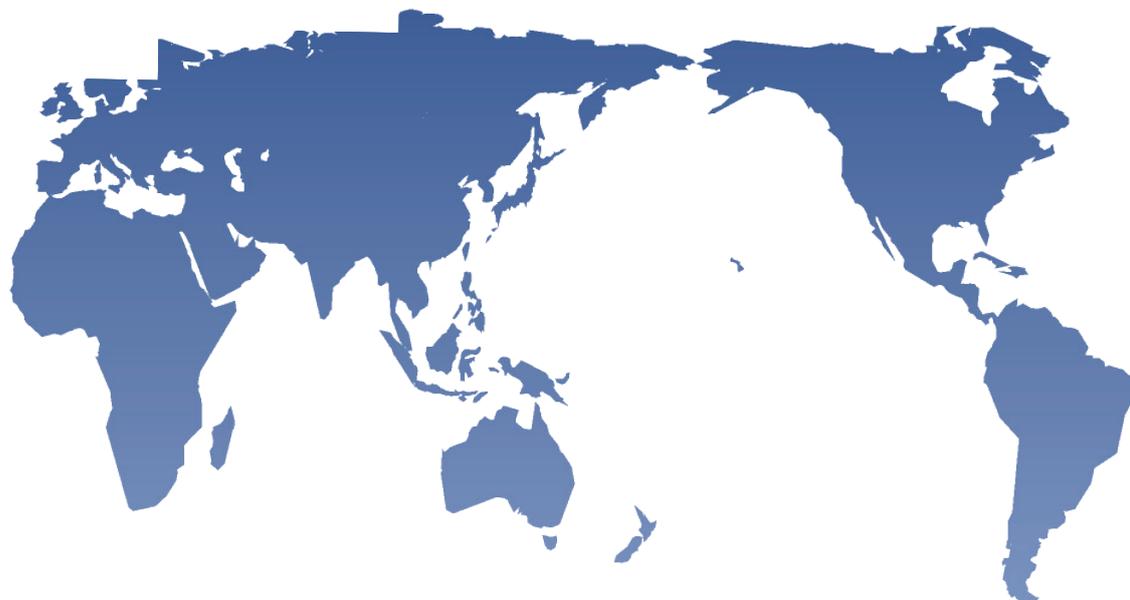

Au cours de son siècle d'existence, Takara Belmont s'est toujours engagé à accompagner ses clients vers le chemin de la beauté et de la santé.



Usine à Osaka,

et ses artisans et techniciens hautement qualifiés, lors de la production de nos différents équipements.

EURUS S6



Conception pensée et adaptée à vos patients

La tablette praticien montée à la base du fauteuil permet aux dentistes de garder loin de l'oeil du patient du patient tous les instruments et la conception du fauteuil type "chaise" assure un espace de soin compact et efficace.



Mains libres

La chaise est facilement contrôlable avec le pied pour un fonctionnement hygiénique et efficace en mode "mains libres"



Variété de styles de traitement

Le crachoir rotatif à 90° permet aux assistantes de se tenir à la position 3 ou 4 heures, offrant ainsi un accès pratique pour aider le dentiste.



Efficacité

Le positionnement de la table praticien à l'arrière du fauteuil permet aux assistantes de se préparer lors des consultations.


EURUS S8



Effacité accrue grâce à l'unit ambidextre

Le passage rapide et simple entre position droitier et gaucher le rend adapté à une large variété de fonctionnement. changement facile le rend adapté à une variété de styles de fonctionnement.

La scialyque pivotant et la tablette praticien et son large écran tactile assurent un flux de travail efficace dans votre cabinet.

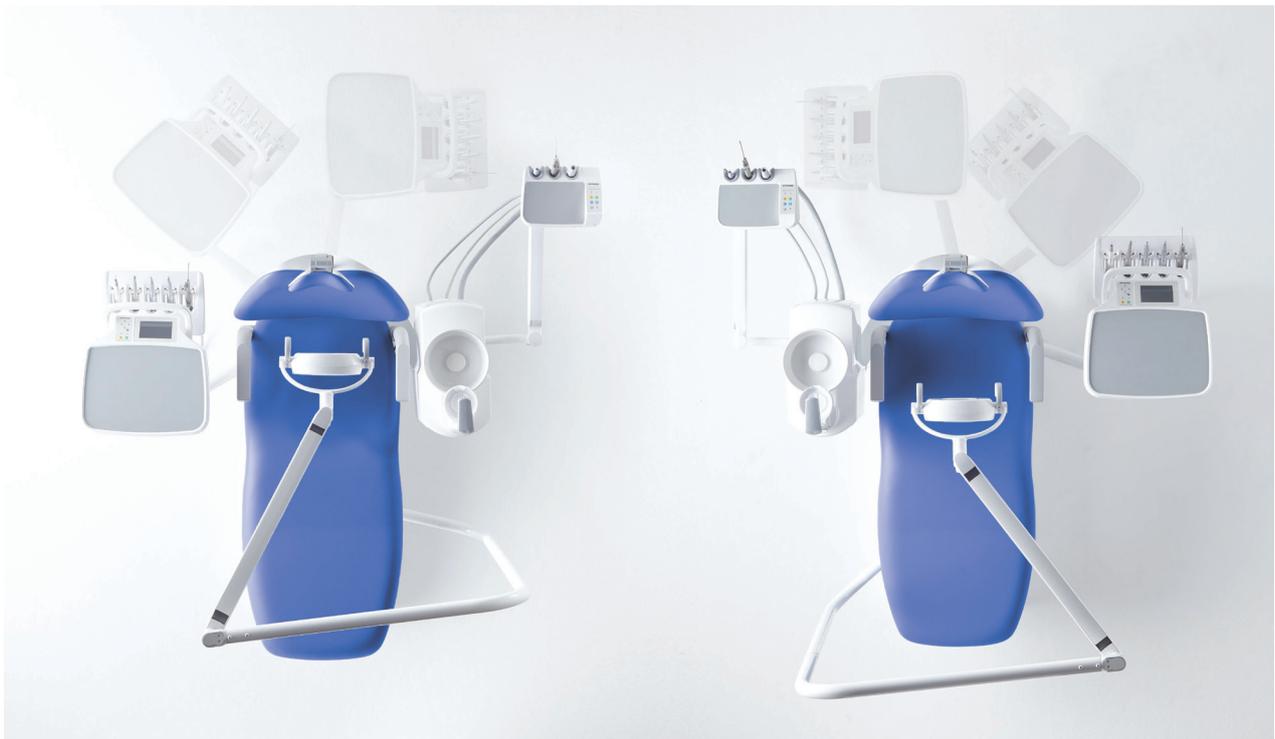

Position à deux mains

La longue portée et le mouvement souple du bras facilitent les soins à deux mains qui peuvent ainsi être administrés sans stress.



Position à quatre mains

Suffisamment d'espace pour les soins en douceur

LÉGER COMME L'AIR



Support de bras

L'amplitude de mouvement vertical de la tablette praticien est de 840, 865 et 890 mm, réglable en hauteur sur trois niveaux.

Poignet

parfaitement adaptée à un fonctionnement commun avec l'écran tactile. La poignée n'est pas seulement conçue pour un mouvement de maintien et de déplacement accru, elle offre également une position de repos idéale pour la main. Cela réduit le stress et la fatigue et facilite le fonctionnement en toute fluidifié de l'écran tactile.



Position de l'instrument pour le type Holder

Conçu pour être indépendant de la tablette, le porte-instruments peut être ajusté librement via un mécanisme de réglage à trois axes pour obtenir la position de travail la plus confortable pour le praticien.



Guide-tuyau pour le type Place

Le mouvement fluide et sans frottement des galets de roulement libère le dentiste et l'assistante dentaire du poids des cordons et la résistance lors de la prise des instruments dentaires.

Version à fouets pour S8




Longue portée pour le type à fouets (ROD)

La longue portée de 900 mm permet au dentiste et à l'assistante dentaire de soigner facilement les patients depuis la position transthoracique ainsi que depuis la position latérale du fauteuil.

CONTRÔLE INTUITIF


Interface

Conçu pour améliorer l'efficacité et réduire le stress pendant les soins, l'écran affiche uniquement les informations nécessaires lorsqu'une pièce à main est sélectionnée et décrochée. Cela permet au praticien de se concentrer sur le traitement en cours ainsi que sur le patient, sans distraction inutile.

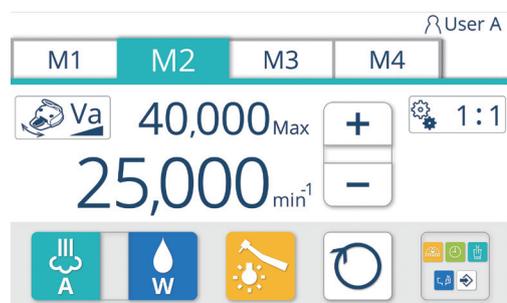

Moteur

- Quatre réglages différents peuvent être enregistrés, permettant un fonctionnement intuitif
- Régime, couple et sens de rotation sélectionnables d'une simple pression sur l'écran

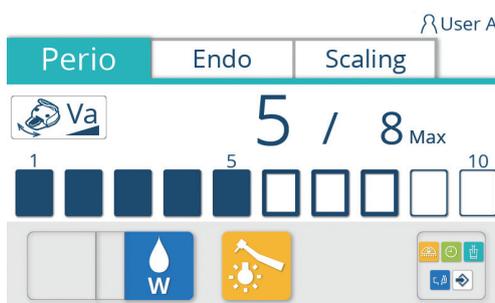

Détartreur

- Mode de soins (parodontal, endodontique et détartrage) sélectionnables d'une simple pression sur l'écran




Fonctionnement latéral

Une nouvelle pédale de commande à glissière permet un réglage précis via des mouvements de position latéraux et une activation par pression. La puissance maximale peut être réglée pour la pièce à main rapidement et intuitivement.

Bien-Air WaveOne

Le système à réciprocité à lime unique WaveOne est maintenant disponible.

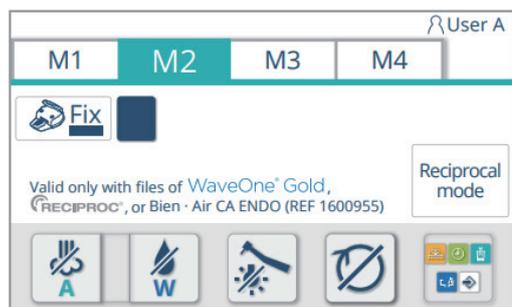

Pour utiliser le mode réciprocité, un contre-angle et des limes spécifiques sont nécessaires.

Le contre-angle spécifique est illustré ci-dessous : CA ENDO (REF 1600955) par Bien Air

Les fichiers désignés sont indiqués ci-dessous :
WaveOne® Gold par Dentsply Maillefer

RECIPROC® by VDW

RESTEZ PROPRE ET EN SÉCURITÉ



Crachoir

Le crachoir a été élargi pour offrir une plus grande capacité et un accès plus facile ce qui, avec le séparateur d'amalgame, garantit le maintien des niveaux d'hygiène les plus élevés.



Système de nettoyage du circuit d'aspiration

Empêche l'accumulation de débris dans la conduite d'aspiration et aide à maintenir une aspiration constante.



Système d'aspiration

L'unité fournit une aspiration efficace et fiable augmentée de * 185%.

Disponible avec double aspiration, ce qui s'avère utile pour les interventions chirurgicales plus intensives.

* Comparaison de nos produits conventionnels dans nos conditions.



Bouteille d'eau (option)

Une eau propre pour les instruments et le verre est fournie par la bouteille d'eau qui est idéalement située et sécurisée immédiatement sous la tablette praticien. Cette bouteille peut également être utilisée avec un produit désinfectant permettant d'assainir le circuit hydrique de l'unité et prévenir la formation de biofilm.

Pièces autoclavables



134°C



Protection de poignées et manchonc carquois autoclavables

Film de protection



Ecran tactile:

Un film de protection jusqu'à 0,15 mm est disponible

LE PLUS HAUT NIVEAU D'HYGIÈNE



Poignée amovible

La face avant du scyaltique peut également être retirée en actionnant un levier pour un nettoyage facile.



Cuvette amovible

La cuvette en céramique se détache facilement pour le nettoyage afin de s'assurer qu'elle est toujours propre et hygiénique.

Nettoyants pour surfaces et aspirateurs



Durr FD366

Désinfection des surfaces
Quand : Après chaque traitement



Durr FD360

Nettoyage du simili-cuir
Quand : Après chaque traitement



Dürr Orotol plus

Désinfection de la ligne d'aspiration
Quand : Quotidiennement



Alpro PlastiSept éco

Désinfection des surfaces
Quand : Après chaque traitement

VARIANTES

S6



Standard



VacPack



Sans crachoir (WOC)



Monté à la base du fauteuil



Cart

S8



Standard



VacPack



Sans crachoir (WOC)



Version Place Type





Cart




Version à fouets

EURUS S6

DIMENSIONS

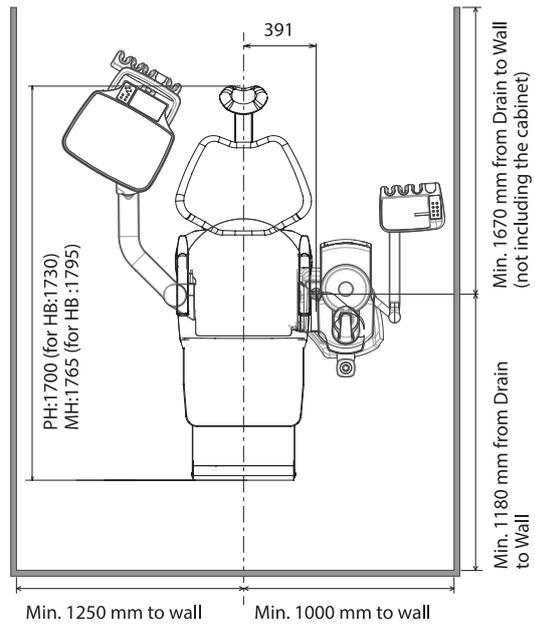
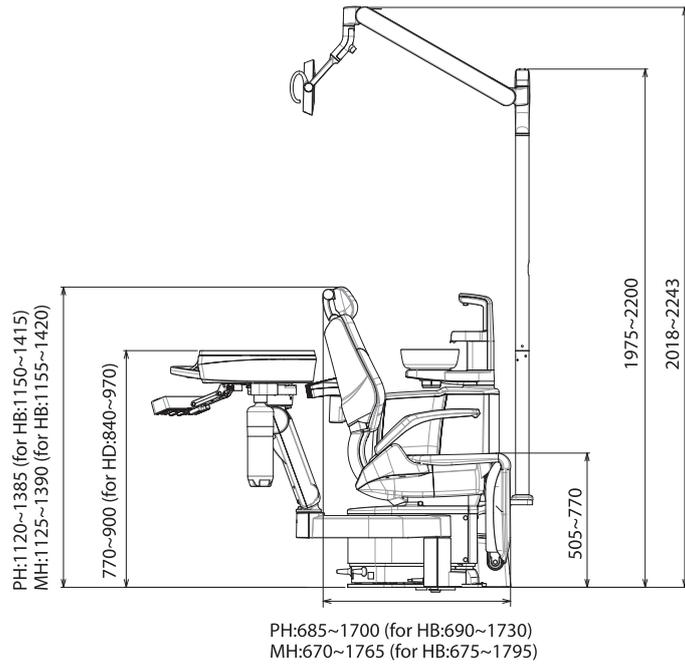


Cart

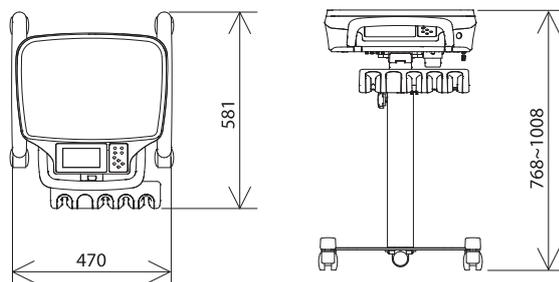

EURUS S8

DIMENSIONS

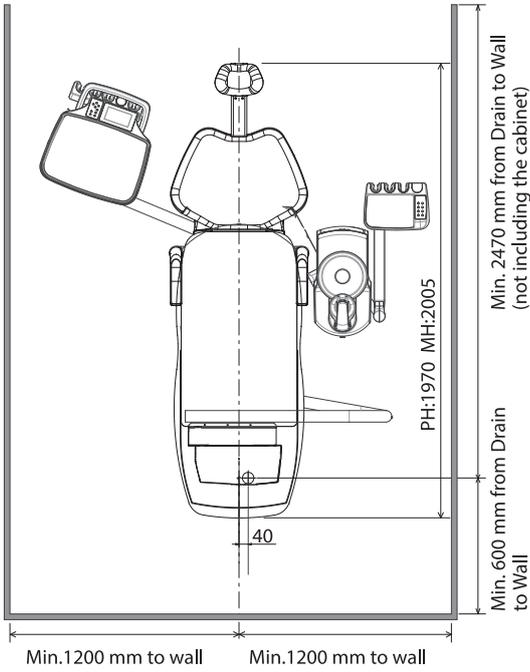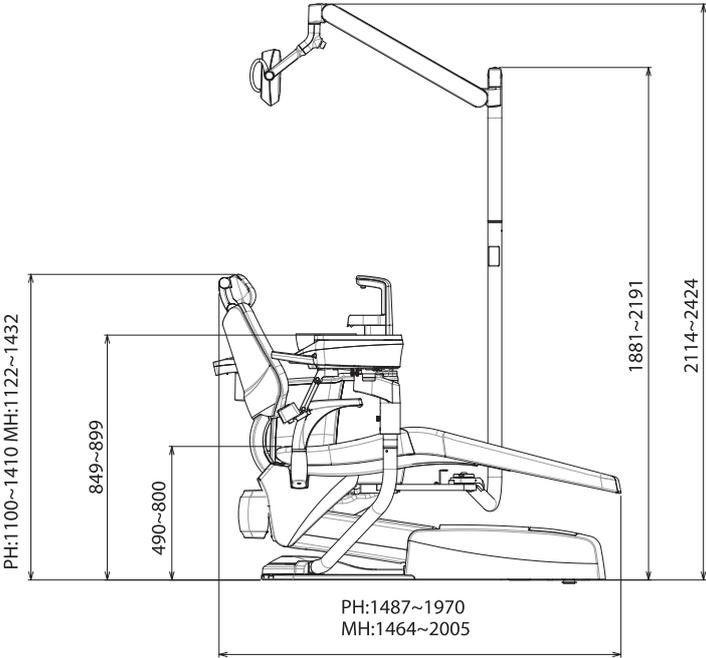

 **Belmont**